


# Diamond APEX™ Pipeta de alto Rendimiento

La serie de pipetas Diamond® APEX™ es simplemente una de las mejores líneas de pipetas disponibles en la actualidad. El pistón magnético asistido asegura la mejor consistencia con cada moción del émbolo desde el primer y segundo tope para aspiración, dispensación y despegue. Posee un nuevo diseño de resorte y sello que requiere de baja presión para ayudar a reducir la fatiga. Este diseño en conjunto con un amortiguador de silicona en el mecanismo de expulsión de la punta ayuda aún más a reducir la fatiga, junto con una aleación resistente a corrosión incrementa la durabilidad. El material del cono de la punta de PVDF previene corrosión y también ayuda a la durabilidad por choque. Las pipetas Diamond® APEX™ están calibradas en una instalación acreditada por ISO17025 y tienen una garantía de 3 años.

La línea de pipetas Diamond® APEX™ están disponibles en modelos de un solo canal y de 8 y 12 canales.

- Totalmente esterilizables en autoclave y resistentes a los rayos UV
- Garantía de 3 años
- Émbolos codificados por colores para una fácil identificación de volúmenes
- Embolo dispensador que requiere de baja presión reduciendo la fatiga
- Pistón asistido por imán para extrema precisión y consistencia
- Diseño ergonómico y de peso liviano
- Ajuste de volumen preciso
- Las pipetas de volumen ajustable cuentan con un mecanismo de bloqueo para evitar cambios de volumen accidentales

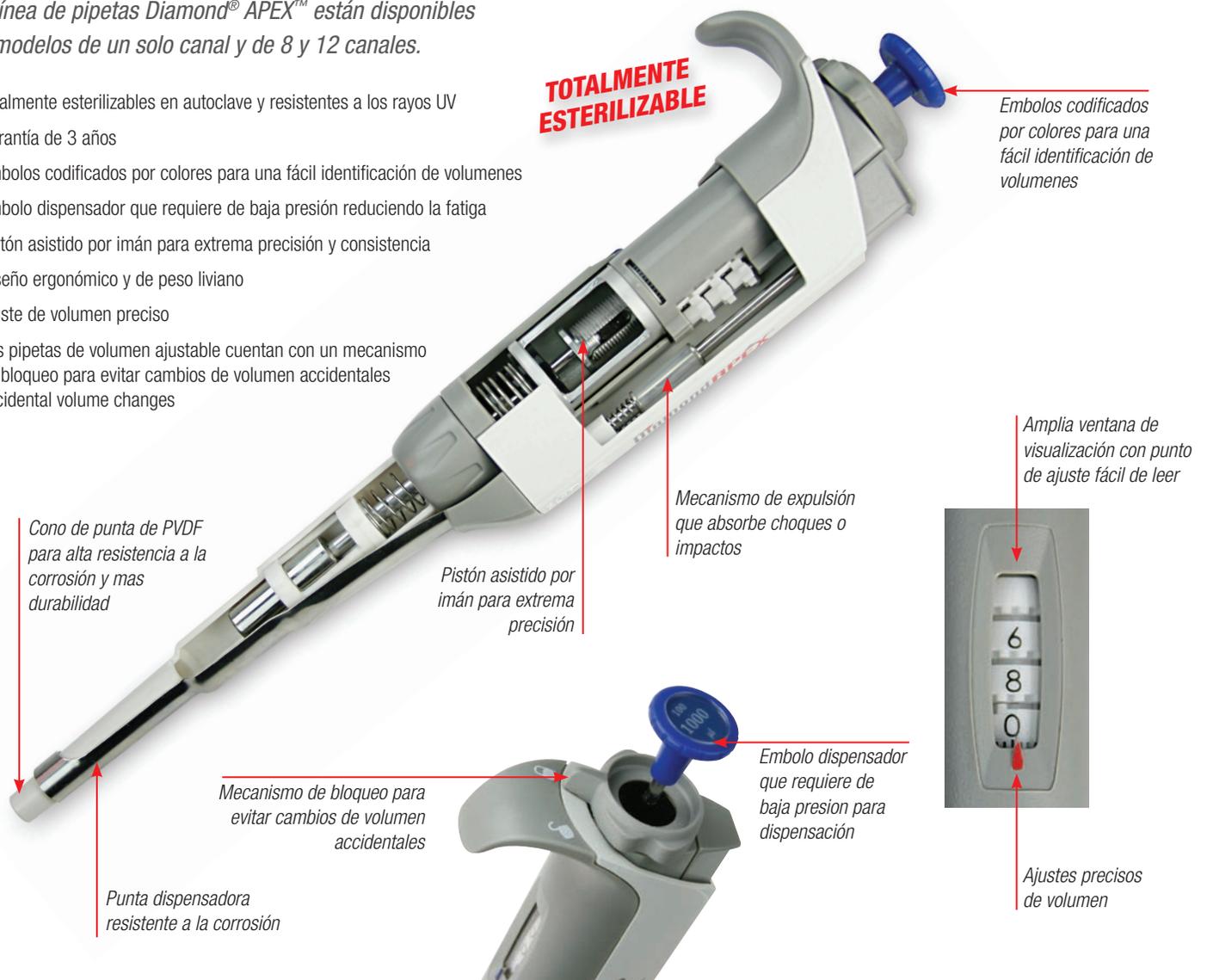

# Diamond APEX™ Multi-Canal

**TODO NUEVO!**

Las pipetas Diamond® APEX™ de 8 y 12 canales incluyen las mismas de características que se encuentran en los modelos de un solo canal y más. La operación simple y el peso ligero ayudan a reducir la fatiga y un colector giratorio de 360 ° permite el posicionamiento vertical u horizontal mientras se aspira o se dispensa. Al igual que con los modelos de un solo canal, todas las pipetas Diamond® APEX™ multicanal se calibran en una instalación acreditada por ISO17025 y vienen con una garantía de 3 años.

Para obtener lo último en pipeteo y ergonomía para la preparación de platos Elija las pipetas multicanal Diamond® APEX™!!

- Cada canal se calibra individualmente
- Colector extraíble, completamente esterilizable en autoclave y resistente a los rayos UV
- Garantía de 3 años
- Émbolos codificados por colores para una fácil identificación del volumen
- Pipeteo prácticamente sin fatiga con émbolo suave que requiere de baja presión
- Pistón asistido por imán para una precisión y consistencia extremadamente alta
- Diseño ergonómico y peso ligero
- Ajuste de volumen preciso
- Mecanismo de bloqueo para evitar cambios accidentales de volumen

**TOTALMENTE ESTERILIZABLE**



**Codigo #3358**  
El soporte del carrusel admite hasta 6 pipetas de un solo canal Diamond® APEX™. Se vende por separado.



**360°**

El colector gira 360 ° para un pipeteo conveniente desde cualquier ángulo

## De un solo Canal / Volumen Ajustable

Codigo #	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Punta
3351-1	0.1-2.5	0.002	Rojo	A
3351-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3351-20	2-20	0.02	Rojo	A
3351-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3351-100	10-100	0.1	Azul	B
3351-200	20-200	0.2	Lavanda	B
3351-1000	100-1000	1	Naranja	C
3351-5000	500-5000	10	Verde	D
3351-10000	1000-10000	20	Verde	F

## De un solo Canal / Volumen Fijo

Codigo #	Volumen (µl)	Color	Grupo de Punta
3352-2	2.5	Rojo	A
3352-5	5	Rojo	B
3352-10	10	Rojo	B
3352-20	20	Amarillo	B
3352-25	25	Amarillo	B
3352-50	50	Azul	B
3352-100	100	Lavanda	B
3352-200	200	Lavanda	B
3352-250	250	Naranja	C
3352-500	500	Naranja	C
3352-1000	1000	Verde	C
3352-2000	2000	Verde	D
3352-5000	5000	Verde	D
3352-10000	10000	Verde	F

## De 8 Canales / Volumen Ajustable

Codigo #	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Punta
3354-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3354-20	2-20	0.02	Amarillo	A
3354-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3354-100	10-100	0.1	Azul	B
3354-200	20-200	0.2	Lavanda	B
3354-300	30-300	0.2	Naranja	B

## De 12 Canales / Volumen Ajustable

Codigo #	Volumen (µl)	Incrementos (µl)	Color	Grupo de Punta
3355-10	0.5-10	0.02	Rojo	A
3355-20	2-20	0.02	Amarillo	A
3355-50	5-50	0.1	Amarillo	B
3355-100	10-100	0.1	Azul	B
3355-200	20-200	0.2	Lavanda	B
3355-300	30-300	0.2	Naranja	B



www.globescientific.com

Phone 1 (800) 394-4562 • 1 (201) 599-1400

Fax 1 (201) 599-1406

E-mail mail@globescientific.com

